



監査履歴の活用で
様々なお問合せに
最適な対応が可能になり、
患者様からの信頼も向上。
(風間薬局様・長野)

auditを使って
むしろ調剤の時間が
早くなった
(加賀千代薬局様・秋田)

監査を効率化し、
患者様との会話や
処方箋監査の時間を
しっかり確保。
(品川薬局様・静岡)

お客様の声



「機械と人の目」により
一人薬剤師店舗でも
ダブルチェック体制を
実現。
(ハート薬局様・京都)

一人薬剤師の
抱える精神的な
ストレスから開放。
(しろくま薬局様・大阪)

ジェネリックや
規格違い薬品の
監査で効果を発揮。
(スター薬局様・栃木)

素早く簡単なマスタ登録

1 薬品あたり数十秒のスピード登録
簡単な手順で薬品マスタを登録できます。

導入したその日からお使いいただけます。
初期導入時にメーカー所有の薬品マスタをご提供します。

薬品を並べる様子

薬品マスタ登録画面

主な仕様			
専用トレイ	3枚付属	インターフェース	NSIPS 準拠
CPU	Intel Mobile Processor Corei5-2510E	液晶パネル	12.1インチTFTカラーLCD、XGA(1024×768)、26万色
OS	Microsoft Windows Embedded Standard 2009	寸法	490(W)×440(D)×662(H)(表示部立ち上げ寸法を含まず)
HDD	約 500GB×2	質量	30kg
LAN	2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)	消費電力	92w
USB	6ポート(USB2.0 準拠)	最大秤量値	800g

オプション バックアップシステム、追加トレイ、ウィルス対策ソフト、複数台接続

ご注意

- 本製品は薬剤師の調剤監査業務を支援する製品であり、最終監査を保証するものではありません。
- レセプトコンピュータ及び接続回線は本製品の範囲外となります。
- 弊社から提供する専用トレイをご利用ください。その他のトレイで監査する場合、正しく監査できません。

DAIFUKU

Always an Edge Ahead

株式会社ダイフク

〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島 2-13-4
〒105-0022 東京都港区海岸 1-2-3
汐留芝離宮ビルディング 15F



製品の
お問い合わせ

www.audit-pr.daifuku.jp TEL 03-6721-3530

詳しくはこちらから [ダイフク 調剤監査](#) 検索

ダイフクは物流システム・機器の世界的な総合メーカーです。自動車の生産ラインシステムや自動倉庫などを、日本はもとよりさまざまな国に納入しております。

●仕様は予告なく変更することがあります。●カラー写真の色調は、出力によって実際の色と異なる場合があります。



調剤監査システム

audit[®]

BCR

DAIFUKU Always an Edge Ahead

精確な調剤と記録する安心

患者様、薬剤師、薬局経営を守る間違いのない選択

audit[®] BCR


【特許取得済み】

素早く簡単な監査手順

- 薬種と数量を同時に識別します。
- 複数種類の薬品を一度に投入可能です。
- 輪ゴム留め状態のままでも照合できます。
- 表裏どちらでも照合できます。
- バーコードがない端数やピロー包装も照合できます。


監査の記録を全て保存 **Auto save**

- 監査結果は全て自動で保存されます。
- 安心の長期保存です(標準 6ヶ月)。
- 患者様からの問合せにも安心して対応できます。
- 監査結果を印刷できます。
- 一包化した薬品等を追加撮影し監査結果と一緒に記録できます。

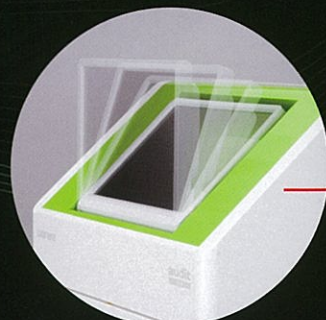


モニター

ボディと一体化した大型画面。見やすい角度に調整できます。

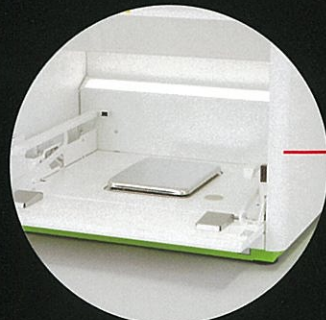

計量器

監査用の計量器を内蔵しています。

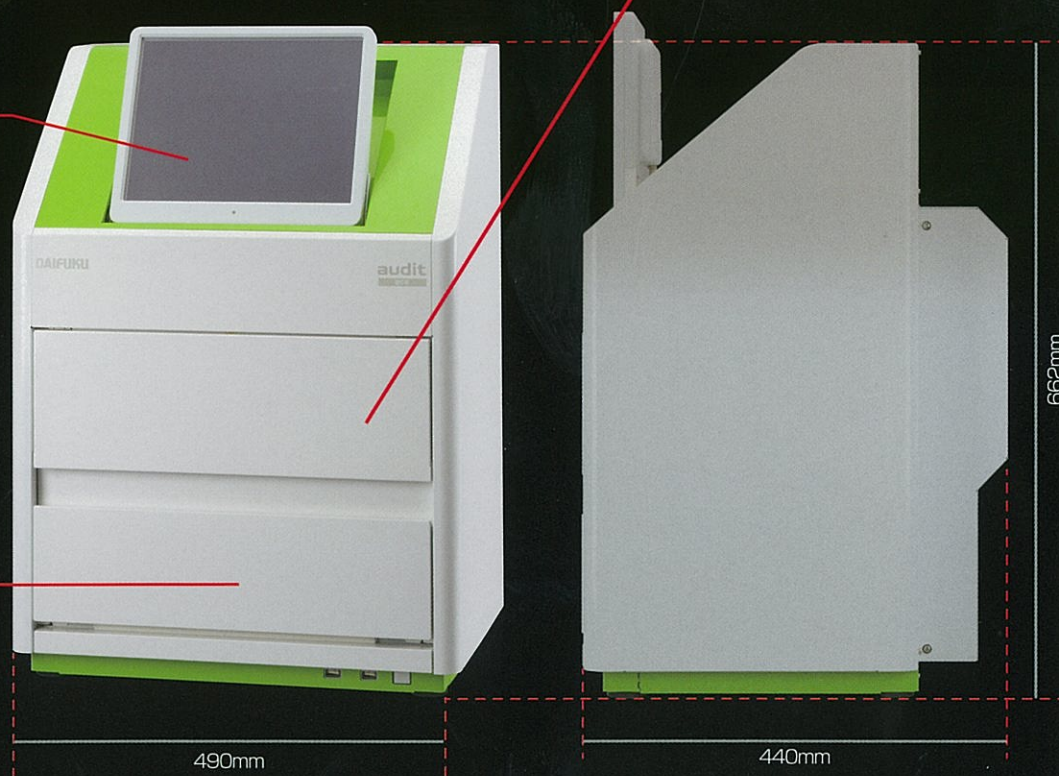

ボディ

ラウンドシェイプの機能的なデザインです。

調剤の現場にフィットしたハード構成

- パソコン内蔵の一体型構造で、省スペースを実現しました。
- ファンレス構造により、静音・高耐久性を実現しました。
- 厳しい耐久試験をクリアしており、安心して長くお使いいただけます。

バーコード識別機能が加わりさらに利便性が向上

利便性向上

● バーコード識別




バーコード部分を瞬時に読み取ります。

● 画像識別



バーコードのない面やピロー包装も照合できます。

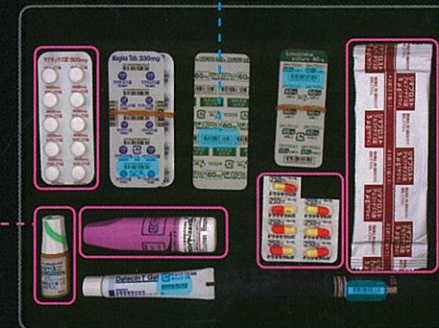

種類OK

総重量OK

監査履歴画面 **Auto save**

処方箋	薬名	数量	単位	照合	追加撮影
内服	DEMO00101 マグナックス錠330	20	錠	○	
内服	DEMO00103 ロキソプロフェンナト	20	錠	○	
内服	DEMO00105 ビタミン配合カプセル	20	錠	○	
内服	DEMO00106 リマプロストアルファ	63	錠	○	

監査履歴を印刷できます。

監査の流れ



対象商品をトレイに載せます



下扉を開けトレイを挿入します



扉を閉じ該当する処方を選択します



'照合' ボタンを押し監査します



'種類OK' '総重量OK' で監査が完了します



監査が完了したトレイを取り出します

Auto save 監査結果は全て自動で保存されます。